

ECO-Brace Light

-jalkaterän abduktio-ortoosi

Käyttöohje





semēda
ORTHOPAEDIC PRODUCTS

... step by step forward

Sisältö

1. Tietoa tuotteista	4
1.1 Vaara- ja turvaohjeet.....	4
1.2 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosi	6
1.2.1 Käyttötarkoitus	6
1.2.2 Näin se toimii	6
1.2.3 Jalkatuki.....	7
1.2.4 ECO-Brace Light -tankokengät.....	7
1.3 Tarvikkeet.....	7
1.3.1 ALFA Soft -kantapehmuste	8
1.3.2 ALFA-Flex -pohjalevyt.....	8
2. Käyttö	9
2.1 Ortoosin pukeminen.....	9
2.2 Punoitus ja painaumat	10
2.3 Jalkahiki ja kosteus.....	10
2.4 Pukeminen.....	10
2.5 Tangon säädöt	10
2.6 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin puhdistus.....	10
2.7 Tunnetut kontraindikaatiot ja haittavaikutukset ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosinkäytön yhteydessä	11
2.8 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin puhdistus.....	11
2.9 Tuotteen käyttäjän koulutukset tai erityisvalmiudet.....	11
2.10 Käytöstä poisto	12
2.11 Vakavista tapauksista ilmoittaminen	12
3. Osoitteet	12
3.1 Valmistaja (nimi, osoite, yhteystiedot).....	12
4. Suoritustiedot.....	13
4.1 ECO Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin tekniset ominaisuudet.....	13
4.1.1 ECO-Brace Light -tankokenkien erityisominaisuudet	13
4.2 Jalkatukien tekniset ominaisuudet.....	14
4.2.1 ALFA-Flex -jalkatukien erityisominaisuudet.....	14
4.2.2 COMFOOT-remmikenkien/jalkatukien erityisominaisuudet	15
4.3 Kuvien ja tunnusvärien merkitys	16
5. Asennusohjeet (vain apuvälineteknikolle)	17
5.1 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin asennusohje.....	17

TÄRKEÄÄ

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi kaikki ohjeet. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten. Mikäli tätä tuotetta käyttävät myös muut henkilöt, anna käyttöohje myös heidän käyttöönsä.

1. Tietoa tuotteista

1.1 Vaara- ja turvaohjeet



Tarkista tankokengän ja jalkatukien oikea liitântä joka kerta ortoosia asettaessasi.



Varmista, että jalka istuu asianmukaisesti ja tukevasti jalkapidikkeessä, sillä muuten voi syntyä painaumuksia, rakkoja ja punoitusta.



Jalkatukia on tuuletettava kahdesti päivässä 30 minuutin ajan.



Jos jalat hikoilevat voimakkaasti, vaihda sukat useita kertoja päivässä.



Tarkista säännöllisin väliajoin, etteivät tangon ruuvit löysty.



Jalkaterän abduktio-ortoosin (yksi pari jalkatukia ja yhdet tankokengät) saa asentaa vain ammattitaitoinen henkilökunta (ortopedinen suutari tai apuvälineteknikko).



semēda[®]
ORTHOPAEDIC PRODUCTS

... step by step forward



Jos ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosissa ilmenee vika, ota yhteyttä apuvälineteknikkoon tai ortopediseen suutariin.



Tankokenkiä ei saa iskeä koviin esineisiin (esim. hyyttämällä lasta lattialla). Tanko voi murtua!



Kun ortoosia ei käytetä, se on säilytettävä lasten ulottumattomissa.



Jalkaterän abduktio-ortoosia saa käyttää vain sukkiensa kanssa!



Jalkatuet eivät ole kävelykengät, ja niitä tulisi käyttää vain yhdessä tangon kanssa!



Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa muovia ja nahkaa.



ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin turvallisen asentamisen saa suorittaa ainoastaan ortopedinen suutari tai apuvälineteknikko. Älä missään tapauksessa tee muutoksia/säätöjä ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosiin itse, sillä se voi johtaa oireiden uusiutumiseen! Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia asetusten suhteen, ota yhteyttä asentavaan ortopediseen suutariin, apuvälineteknikkoon tai hoitavaan lastenortopediin. Sameda ei ota vastuuta luvattomista ja virheellisistä säädöistä!

1.2 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosi

1.2.1 Käyttötarkoitus

ECO Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosia käytetään vauvoilla ja pikkulapsilla sekä lapsilla, joilla on diagnosoitu idiopaattinen kampuajalka Ponsetin konservatiivisen terapian mukaisesti.

Sitä käytetään ylläpitämään kipsikorjauksella tehtyä jalkaterän oikaisua. Sen tarkoituksena on estää tilanteen uusiutuminen (uusi huononeminen), eikä sillä ole korjaavaa vaikutusta.


Ortopedi määrää ortoosin terapian jatkamiseksi. Apuvälineteknikko (tai ortopedinen suutari) sovittaa ortoosin lapselle ortopedin antaman määräyksen perusteella. Vanhempien tehtävä on pukea ortoosi lapselle päivittäin. Ortoosi on uudelleenkäytettävä tuote.

1.2.2 Näin se toimii

Jalkaterän abduktio-ortoosi koostuu ECO-Brace Light -tankokengistä ja jalkatuesta.

On olemassa erilaisia jalkatukia, jotka sopivat ECO-Brace Light -tankokenkiin.

1. ALFA-Flex -kengät / Henry-jalkatuet
2. COMFOOT-Blue -remmikengät / jalkatuet
3. COMFOOT-White -remmikengät / jalkatuet

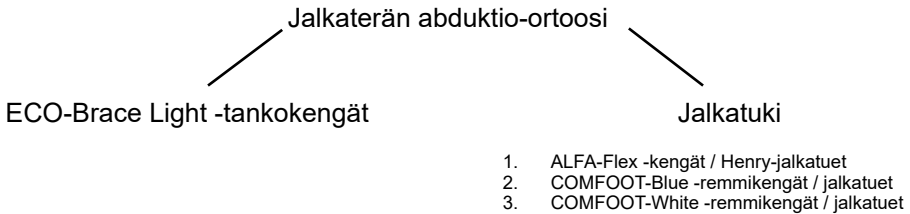

1.2.3 Jalkatuki

Vastaavaa jalkatukea käytetään hoidettavan lapsen jalkojen kiinnittämiseen. Se liitetään tankoon salpalukolla.


1.2.4 ECO-Brace Light -tankokengät

ECO-Brace Light -tankokengissä on kaksi kenkien kiinnityslevyä, joita voidaan liikuttaa molempiin suuntiin ortopedin määrittelemien terapeuttisten kulmien säätämiseksi (abduktiokulma 0° - 80°). Kenkien kiinnityslevy on asennettu kiinteästi 5 asteen dorsifleksioon.

ECO-Brace Light -tankokengissä on portaattomasti enintään 30 cm:n pituiseksi säädettävä tanko ja se kasvaa potilaan mukana koko terapiajakson ajan.

Toimintojen kannalta tärkeimmät ECO Brace Light -tankokenkien osat ovat:

- a) 2 tankovartta
b) 2 kenkien kiinnityslevyä

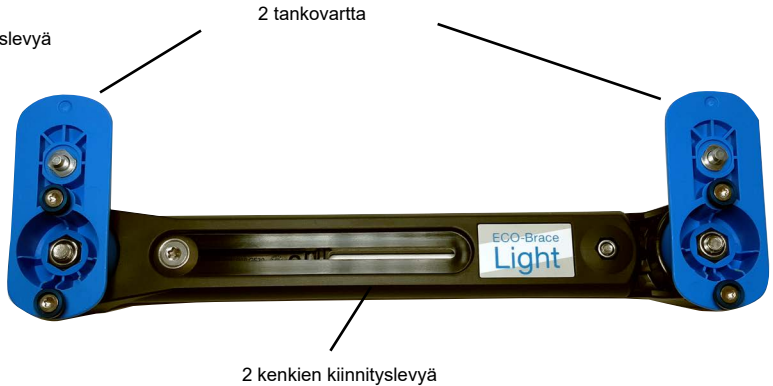

2 tankovartta on sijoitettu päällekkäin ja ne on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Kun tangon pituutta muutetaan, ruuvit löysätään mukana toimitetuilla avaimilla, tankovarret vedetään haluttuun pituuteen ja ruuvit kiristetään uudestaan.

Kummankin kiskovarren ulompi pää päättyy puolipyöreään päähän. Kumpaankin on kiinnitetty kengän kiinnityslevy kuusiokoloruuvilla. Päädyssä olevan ikkunan läpi näkyy mitta-asteikko 0 ja 80 asteen välillä, joten kengän kiinnityslevy voidaan kääntää haluttuun abduktiokulmaan.



Kenkien kiinnityslevy on asennettu kiinteästi 5 asteen dorsifleksioon. Kengän kiinnityslevyn yläosassa on kaksi liuku-lohkoa, alaosaan on kiinnitetty jousitetut lukitusnastat. Niitä käytetään jalkatuen liittämiseen (kts. 2.1).

1.3 Tarvikkeet

1.3.1 ALFA Soft -kantapehmuste

ALFA Soft -kantapehmuste sopii käytettäväksi erityisesti ALFA Flex -kenkien/jalkatukien kanssa.

Tämä kantapehmuste antaa jalalle lisätukea ja ehkäisee tai lievittää painaumia. Sitä on saatavana kaksi kokoa, se voidaan kiinnittää kenkään ja leikata yksilöllisesti sopivaksi.



1.3.2 ALFA-Flex -pohjalevyt

ALFA-Flex -pohjalevyt ovat mahdollinen lisävaruste tankokenkiä varten. Niiden käyttö muuttaa ortoosin rakennetta. ALFA-Flex -pohjalevyjä käytetään poikkeustapauksissa ulkopuolisen, mittatilaustyönä valmistetun jalkatuen kiinnittämiseen Semedan valmistamiin tankokenkiin.

Tankokenkien käyttö mittatilaustyönä valmistetun apuvälineen kanssa ei vastaa tässä kuvattua ortoosijärjestelmää. Siksi vastaamme vain tarjoamistamme lisävarusteesta eli pohjalevyistä.

2. Käyttö

2.1 Ortoosin pukeminen

Kun saat tankokengät lääkäriiltäsi tai apuvälineteknikolta, hän säätää tangon kulmat ja pituuden. Älä tee mitään muutoksia näihin asetuksiin, ne ovat hoidon kannalta välttämättömiä!

1. Pue lapsellesi **ehdottomasti** sukat tai sukkahousut. Avaa kengän kaikki pidikkeet.



2. Aseta jalka sisään niin, että kantapää on täysin takana ja alhaalla. Tarkista kengän istuvuus tarkastusikkunan avulla.



3. Sulje keskimmäinen remmi ensimmäisenä. Sen tulee istua tiukkaan, sillä se pitää kantapään oikeassa asennossa.



4. Vedä sukan yläosasta ja kärjestä suoristaaksesi laskokset. Sulje tämän jälkeen väljästi yläremmit ja toista sama toisen kengän kohdalla.



5. Kun kiinnität kiskon kenkiin, aseta napsautettava pidike pohjassa oleviin syvennyksiin ja liu'uta kiskoa kohti kantapäätä, kunnes pidike napsauttaa paikalleen.



2.2 Punoitus ja painaumat

Ihmeikäisten iho ei ole vielä sopeutunut kenkien käyttöön ja on siksi hyvin herkkä. Vaikka kengät on valmistettu pehmeästä materiaalista, saattaa joskus muodostua painaumia tai rakkuloita. Punaiset jäljet tai rakkulat erityisesti kantapään takaosassa, ovat yleensä merkki siitä, että kenkää ei ole puettu tarpeeksi tiukasti. Siksi on erityisen tärkeää varmistaa, että jalka istuu todella tukevasti kengässä. Jos kenkä pääsee hieman liukumaan edestakaisin, syntyvät painaumat hyvin nopeasti. Varmista, että kantapää on kengässä pohjallista vasten, kiristä tarvittaessa hihnaa yksi reikä lisää. Älä koskaan käytä voidetta ihon punaisiin kohtiin. Voiteet voivat pahentaa ongelmaa.

Jos ihon punoitus häviää, kun kenkä otetaan pois jalasta lyhyeksi aikaa, ei ole syytä huoleen. **Jos punoitus kuitenkin voimistuu ja muuttuu tummemmaksi tai jos siihen muodostuu rakkuloita, ota yhteys hoitavaan lääkäriin mahdollisimman pian.** Hän päättää jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa jalkaan laitetaan kipsi, joka jätetään auki punoitavasta kohdasta, jotta iho pääsee parantumaan. Sillä jatkuvat ongelmat käytön aikana voivat olla varhainen merkki oireiden uusiutumisesta.

2.3 Jalkahiki ja kosteus

Lapsilla, joilla on taipumusta runsaaseen jalkahikoiluun, epätavallisen pitkä 23 tunnin päivittäinen käyttöaika voi aiheuttaa kenkien jatkuvan kosteuden. Jos käytät nahkavuorattua kenkää, sen sisäpuolelle saattaa harvinaisessa tapauksessa muodostua hometta, sillä allergiaoireiden välttämiseksi nahka on parkittu ainoastaan kasvipohjaisilla tuotteilla. Suosittelemme aina vuorin materiaalista riippumatta:

- tuuleta kenkiä kahdesti päivässä puolen tunnin ajan
- mikäli jalat hikoavat runsaasti, vaihda sukat useita kertoja päivässä

2.4 Pukeminen

Jalkatukia on käytettävä sukkiin tai sukkahousujen kanssa. On tärkeää välttää painekohtien muodostumista. On suositeltavaa käyttää sukki, joiden sisäpuolella on vähän lankoja ja saumoja, ja varmistettava, että kankaassa ei ole laskoksia.

2.5 Tangon säädöt

ECO-Brace Light -tankokengät säädetään alusssa kampurajalkaan yleensä 70 asteen ulkokiertoon (abduktio) ja terveen jalkaan 40 asteen kiertoon. Dorsifleksio – jalan koukistuminen kohti sääriluuta – asetetaan kiinnittämällä tanko 5 asteeseen. Tangon pituuden tulisi olla hieman suurempi kuin lapsesi hartioiden leveys.

2.6 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin puhdistus

Tankokengät voidaan pestä vedellä ja saippualla. Niitä ei tarvitse desinfioida. Jos siitä huolimatta käytät desinfiointisuihketta tai muita voimakkaita puhdistusaineita, materiaali voi vahingoittua.

2.7 Tunnetut kontraindikaatiot ja haittavaikutukset ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosinkäytön yhteydessä

Ehdoton kontraindikaatio on kipsihoito, jota ei ole suoritettu loppuun ja etenkin silloin, jos kantapää on edelleen kohoosennossa. Tällöin jalka ei istu oikein kengässä eikä tankoon säädetty dorsifleksio täytä tarkoitustaan (pystyjalan välttäminen).

Suhteellisia kontraindikaatioita ovat hoidettavien lasten monivammaisuus. Ponsetin-menettelyn mukaisessa kampurajalkojen hoidossa nämä määrittelee asianomaisen klinikan hoitava lääkäri.

Sivuvaikutuksena voi esiintyä rakkoja tai punoittavia kohtia. Näissä tapauksissa vanhempien tulisi ottaa yhteys vastaavaan apuvälineteknikkoon.

Muita sivuvaikutuksia ei tunneta.

2.8 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin puhdistus

Jalkaterän abduktio-ortoosin sovitamisen saa suorittaa ainoastaan siihen erityisesti koulutettu henkilö. Näitä henkilöitä ovat apuvälineteknikko tai ortopedinen suutari.

2.9 Tuotteen käyttäjän koulutukset tai erityisvalmiudet

ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin sovituksen jälkeen apuvälineteknikko / ortopedinen suutari tai hoitava lääkäri opastaa hoidettavan lapsen vanhempia sen käyttöön.

Apuvälineteknikon/ortopedisen suutarin pätevyysvaatimuksena tulisi olla suoritettu ammattikoulutus omalta erikoisalaltaan. Apuvälineteknikon / ortopedisen suutarin tulee lukea Semedan käyttöohje huolellisesti läpi.

2.10 Käytöstä poisto



Vanhemmat tai sovituksen tekevä apuvälineteknikko huolehtivat tuotteen turvallisesta hävittämisestä. Tuote voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti.

2.11 Vakavista tapauksista ilmoittaminen



Kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista (tapahtumista) on ilmoitettava valmistajalle (ks. kappale 3) ja käyttäjän toimipaikan lääketieteellisten laitteiden valvonnasta vastaavalle viranomaiselle.

3. Osoitteet

3.1 Valmistaja (nimi, osoite, yhteystiedot)

Semeda GmbH
Am Petersberg 36
29389 Bad Bodenteich

Puh. +49 (0)5824 98 555-0
Faksi: +49-(0)5824 98 555-20

Sähköposti: info@semeda.de

Internet: www.semeda.de

4. Suoritus tiedot

4.1 ECO Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin tekniset ominaisuudet

4.1.1 ECO-Brace Light -tankokenkien erityisominaisuudet

Tuotenumero	ECO-Brace Light -tankokengät
Tuotenumero	EC 0500 -002
Käyttö samanaikaisesti:	Jalkatuet: ALFA-Flex -kengät / Henry-jalkatuet COMFOOT-Blue -remmikengät / jalkatuet COMFOOT-White -remmikengät / jalkatuet
Käyttötarkoitus	Ortoosijärjestelmänä jalkatukien kanssa: ECO Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosia käytetään vauvoilla ja pikkulapsilla sekä lapsilla, joilla on diagnosoitu idiopaattinen kumpurajalka Ponsetin konservatiivisen terapian mukaisesti. Sitä käytetään ylläpitämään kipsikorjauksella tehtyä jalkaterän oikaisua. Sen tarkoituksena on estää tilanteen uusiutuminen (uusi huononeminen), eikä sillä ole korjaavaa vaikutusta.
Indikaatio	Idiopaattisen kumpurajalan hoito
Terapeuttinen toimintaperiaate	Jalan kiinnittäminen kumpurajalan uusiutumisen ehkäisemiseksi
Potilasryhmä	Vauvat/taaperot/lapset ikähaarukalla 0 - 5 vuotta
Koko/leveys	Tangon pituus enint. 30 cm
Väri	musta/sininen
Materiaali	Muovia
Varusteiden ominaisuudet	
Abduktiokulman säätö	0 ja 80 asteen välillä
Dorsifleksion säätö	Asetettu 5 asteeseen
Klipsilukot jalkatukien säätämistä varten	X
Tankomallit	
---	---
Tuotteen lisätarvikkeet	
ALFA-Flex -pohjalevyt	X
Tuotenumero	ET 0700-003

4.2 Jalkatukien tekniset ominaisuudet

4.2.1 ALFA-Flex -jalkatukien erityisominaisuudet

Tuotenimi	ALFA-Flex -kengät / Henry-jalkatuet
Tuotenumero	AL 1411-koko-sivu
Käyttö samanaikaisesti:	ECO-Brace -tankokengät
Käyttötarkoitus	Ortoosijärjestelmänä tankokenkien kanssa: Jalkaterän abduktio-ortoosia käytetään vauvoilla ja pikkulapsilla sekä lapsilla, joilla on diagnosoitu idiopaattinen kumpurajalka Ponsetin konservatiivisen terapian mukaisesti. Sitä käytetään ylläpitämään kipsikorjauksella tehtyä jalkaterän oikaisua. Sen tarkoituksena on estää tilanteen uusiutuminen (uusi huononeminen), eikä sillä ole korjaavaa vaikutusta.
Indikaatio	Idiopaattisen kumpurajalan hoito
Terapeuttinen toimintaperiaate	Jalan kiinnittäminen kumpurajalan uusiutumisen ehkäisemiseksi
Potilasryhmä	Vauvat/taaperot/lapset ikähaarukalla 0 - 5 vuotta
Koko	070-210 (jalan pituus millimetreinä)
Väri	sininen
Materiaali	Nahka + tekstiili
Varusteiden ominaisuudet	
Kiskoon napsautettava pidike	X
Tappisoljelliset remmit	--
Tarranauhat	3
Tuotteen lisäosat	
ALFA Soft -kantapehmuste 1: pieni, kengän koko 70 – 100, tuotenumero: AL 1700-001	X
ALFA Soft -kantapehmuste 2: kengän koko alkaen 110, tuotenumero: AL 1700-002	X

4.2.2 COMFOOT-remmikenkien/jalkatukien erityisominaisuudet

Tuotenumero	COMFOOT-White -remmikengät / jalkatuet	COMFOOT-Blue -remmikengät / jalkatuet
Tuotenumero	CW 1833-Koko-sivu	CB 1811-Koko-sivu
Käyttö samanaikaisesti:	ECO-Brace Light -tankokengät	
Käyttötarkoitus	<p>Ortoosijärjestelmänä tankokenkien kanssa: Jalkaterän abduktio-ortoosia käytetään vauvoilla ja pikkulapsilla sekä lapsilla, joilla on diagnosoitu idiopaattinen kumpurajalka Ponsetin konservatiivisen terapian mukaisesti.</p> <p>Sitä käytetään ylläpitämään kipsikorjauksella tehtyä jalkaterän oikaisua. Sen tarkoituksena on estää tilanteen uusiutuminen (uusi huononeminen), eikä sillä ole korjaavaa vaikutusta.</p>	
Indikaatio	Idiopaattisen kumpurajalan hoito	
Terapeuttinen toimintaperiaate	Jalan kiinnittäminen kumpurajalan uusiutumisen ehkäisemiseksi	
Potilasryhmä	Vauvat/taaperot/lapset ikähaarukalla 0 - 5 vuotta	
Koko	070-180 (jalan pituus millimetreinä)	070-180 (jalan pituus millimetreinä)
Väri	Valkoinen	sininen
Materiaali	Nahka, neopreeni ja lycra	Nahka, neopreeni ja lycra
Varusteiden ominaisuudet		
Kiskoon napsautettava pidike	X	X
Tappisoljelliset remmit	3	1
Tarranauhat	--	2
Tuotteen lisäosat	-	

4.3 Kuvien ja tunnusvärien merkitys

Käyttöohjeessa ja tuotteessa on käytetty seuraavia kuvia:



HUOMIO: Tällä merkinnällä on merkitty käyttöohjeen varoitukset ja varotoimenpiteet.



NOUDATA KÄYTTÖOHJETTA Tällä merkinnällä ilmoitetaan, että käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeisiin.



TUOTENUMERO: Näyttää valmistajan tuotenumeron, jotta lääketieteellinen laite voidaan tunnistaa.



ERÄNUMERO: Näyttää valmistajan eränumeron, jotta yksittäinen lääketieteellinen laite voidaan tunnistaa.



VALMISTUSPÄIVÄ: Näyttää päivämäärän, jolloin lääketieteellinen laite on valmistettu.



LÄÄKETIETEELLINEN LAITE: Merkinä siitä, että kyseessä on lääketieteellinen laite.



VALMISTAJA: Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti.

5. Asennusohjeet (vain apuvälineteknikolle)

5.1 ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosin asennusohje

ECO-Brace Light ASENNUSOHJE ortopediteknikolle

Jalkaterän ulkokierros ortoosi idopaattisen kampuroidun jälkihoidon Ponseti-menetelmän mukaisessa terapiassa. Hoidon suositeltu kestoaika: viimeisen kipsin irrottamisesta lapsen 4. / 5. elinvuoteen saakka.

Pakkauksen sisältö:

ALFA-Flex tai COMFOOT-Blue kengäti/alkäuet
Kuusiokulma-avain 4 / 5 mm, Torx-avain TX10/20
ECO-Brace Light -tankokengät

Tärkeää tietää:

Tanko: Terapiaan, jonka kestoaika on enintään 5 vuotta.
Kokonaisikäytöikä: 8 vuotta.
Kengät: Käyttöikä 8 vuotta.
Sarjanumeron kaksi ensimmäistä numeroa näytävät valmistusvuoden.
Varastointi: Suojattava jäätymiseltä ja valolta, keskiporkeaa ilmankosteus.
Puhdistus: Puhdistus ainoastaan kostealla liinalla, älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.



Tangon pituuden säätäminen:

- Muunneltava pituus 200 - 290 mm.
- Irrota 2 ruuvia tangon päädyin ylä- ja alapuolelta (Torx-avain TX20).
- Tangon pituus asennetaan vähintään (!) lapsen hartialeveydelle.
- Kiristä itselukittuva ruuvi tiukkaan.



Kengien ja tangon puukeminen:

- Aseta jalka kengään niin, että kantapää on kokonaan takana ja alhaalla - tarkista asento kantapään aukosta.
- Sulje ensin keskimääräinen remmi ja vedä se tiukkaan (tämä pitää kantapään oikeassa asemossa), muut remmit kiinnitetään löysästi.
- Aseta kenkä väsymusta klipsikiinnitykseen ja työnnä tankoa taaksepäin kantapäästä kohti, kunnes pullitit lukittuu. Tangon **irrottamiseksi** vedä pullista, työnnä tanko kokonaan jalkaterää kohti ja nostä.

Kengät eivät sovellu kävelyyn! Liukastumisvaara!

Jalkaterän kulman säätö:

- Löysää neiljanneskierros tangon alapuolella olevaa ruuvia (kuusiokulma-avain 4 mm).
- Käännä sinistä kengän alustalevyä vaihteittain ulospäin ja anna sen lukittua haluttuun aseluviin (lue lukema asteikosta) kohdalle (Ponseti suosittelee kampuroidun 70°, terveille jallelle 40°).
- Kiristä itselukittuva ruuvi tiukkaan.



semeda®

ORTHOPAEDIC PRODUCTS

... step by step forward

Semedan ECO-Brace Light -jalkaterän abduktio-ortoosien vaatimustenmukaisuus on vahvistettu CE-merkinnällä. Voit pyytää ajankohtaisen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen Semedalta koska tahansa. Apuvälineteknikot voivat ladata vaatimustenmukaisuusvakuutuksen verkkokaupassa. Ortopedian teknikit saavat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ladattavissa osoitteesta www.semeda.de osiosta [english/download/technicians](http://www.semeda.de/english/download/technicians).

CE



SEMEDA GmbH

Am Petersberg 36
D-29389 Bad Bodenteich
Deutschland/Germany

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0
Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

Mail: info@sameda.de
Web: www.sameda.de