

Ortoza e lëvizjes së këmbës për trajtimin vijues të një këmbë idiopatike me gungë si pjesë e terapisë Ponseti.
Kohëzgjatja e rekomanduar e trajtimit: nga koha e heqjes së fundit të gipsit deri në 4./5. Moshë



Volumi i furnizimit

1. Këpucët ALFA-Flex ose COMFOOT/ mbajtja për këmbët
2. Shina e lëvizjes së këmbës BETA-Flex
3. Çelësi i alenit 4 mm dhe 5 mm
4. Çelës Torx T 20 dhe T 10
5. 2 Krahë shkëmbimi me forcë më të madhe elasticiteti
6. 4 Kunja mbyllëse (nga të cilat 2 kunja rezervë)


Informacione të rëndësishme:

Shinë: Për përdorim për një terapi që zgjat maksimum. 5 vite.
Jetëgjatësia totale: 6 vite Këpucë: Jetëgjatësia 8 vite

Viti i prodhimit mund të gjendet në dy shifrat e para para numrit serial

Magazinimi: pa ngricë, e mbrojtur nga drita, me lagështi mesatarisht të lartë

Pastrimi: përdorni vetëm me një pecetë të lagur, pa lëndë pastrimi gjeryese!

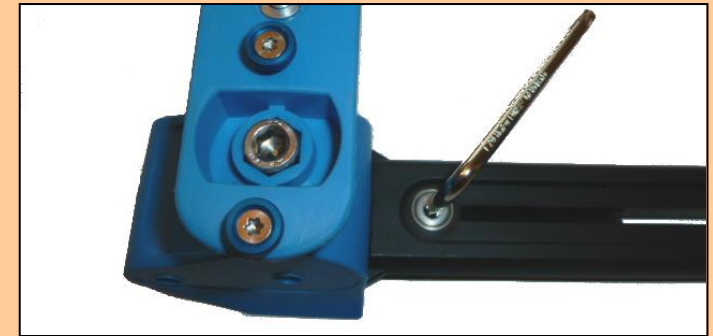



Rregullimi i gjatësisë së shinës:

Gjatësia e ndryshueshme nga 200 deri 290 mm

Lironi 2 vida në shina (Çelësi Torx T 20).

Gjatësia e shinave të paktën (!) rregulloni gjerësinë e shpatullave të fëmijës

Shtrëngoni fort vidat.

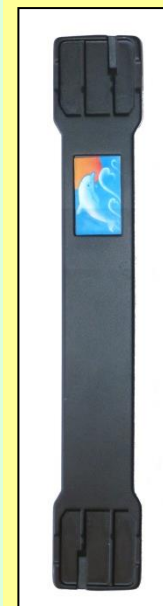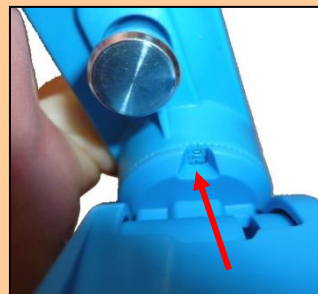

Regjistrimi i këndit të lëvizjes:

Përdorni çelësin alen për të liruar vidën në anën e sipërme të shinës me një çerek rrotullimi.

Më pas ktheni pllakën gradualisht jashtë dhe kapeni atë në numrin e dëshiruar të gradimit (shiko cepin e inspektimit nën pllakën e mbajtësit të këpucëve). Ponseti rekomandon 70° me një këmbë me gungë, 40° në një këmbë të shëndetshme.

Shtrëngoni përsëri fort vidën.

Veshja e këpucëve dhe shinës:

1. Vendosni këmbën në këpucë, në mënyrë që thembra të jetë tërësisht mbrapa dhe poshtë është - kontrolli në cepin e thembrës.
2. Së pari mbyllni rripin e mesëm dhe shtrëngoni fort (mban thembrën në pozicionin e duhur), rripat e tjerë vendosini më të lirshëm.
3. Vendosni këpucën në majë të mbyllje me klik dhe shinën rrëshqitni prapa në drejtim të thembrës, derisa vida të zërë vend.
Për të liruar këpucën, tërhiqni vidën, dhe shinën shtyjeni drejt majës së gishtave të këmbës dhe ngrijeni.

Këpucët nuk janë të përshtatshme për ecje! Rrezik rrëshqitjeje!

Për foshnjat me gjerësi të shpatullave më pak se 20 cm ne ofrojmë BETA-Flex mini tepër të lehtë. Bankina 18,5 cm e gjatë mund të lidhet me rotorët e BETA-Flex Brace.

Kyçja e BETA-Flex Brace Ortoza e lëvizjes së



1

1. Lironi të dy vidat që mbajnë së bashku dy gjysmat e kutisë së rotorit (Çelësi Torx T 10).



2

2. Rrotulloni shinën dhe fiksoni në pjesën e pasme gjysmën e vendosur të kutisë.



3b

3. Vendosni pinin e kyçjes aq sa do të shkojë në vrimën e parashikuar në pjesën e brendshme të rotorit.



4

4. Mbyllni përsëri kutinë e rotorit. Pini i kyçjes përfshihet në vrimën e parashikuar në pjesën e brendshme të kutisë së rotorit.



5

5. Lidhni gjysmat e kapakut të rotorit edhe një herë me të dy vidat. Vidat në këtë rast **sigurojini me „LOCTITE 222“**

6. Përsëriteni procesin me kutinë tjetër të rotorit.

Vendosja i krahëve elastikë më të fortë

1. Lyeni krahët e rinj elastik plotësisht brenda dhe jashtë me graso aksi.
2. Hapni kutinë e rotorit sipas pikës 1. dhe 2. të udhëzimeve në të majtë.



3

3. Tërhiqni kutinë e rotorit jashtë kalimit të shinës.




4. Nxirrni kunjin metalik 1 midis këmbëve të krahut elastik. Më pas hiqni krahun elastik. Kjo gjithashtu liron pjesën e brendshme të rotorit.

5. Vendoseni pjesën e brendshme të rotorit përsëri në kutinë e rotorit dhe mbajeni shtrënguar në vend.
6. Vendosni krahun e ri elastik në mënyrë që krahun **i poshtëm** i pjesës elastike të vendoset **mbi** kunjin metalik 2, krahun **e sipërm** i pjesës elastike **nën** kunjin metalik 2.
7. Rrotulloni krahun elastik nën tension në pozicionin e saktë dhe shtypeni atë në kupolën plastike të kutisë së rotorit.
8. Tani vendosni kunjin metalik 1 midis dy krahëve elastik në vrimën e



5

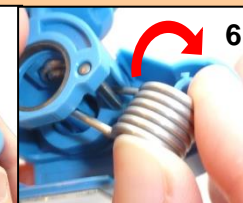

6



7



8

9. Zëvendësoni kalimin e shinës në kutinë e rotorit.
10. Mbyllni kutinë e rotorit sipas pikës 4. dhe 5. të udhëzimeve në të majtë.
11. Përsëriteni procesin me kutinë tjetër të rotorit.



9