

Penahan abduksi kaki untuk pasca-pengobatan kaki pengkor idiopatik dalam batasan Terapi-Ponseti.  
Durasi pengobatan yang disarankan untuk anak: dari saat pengangkatan cetakan terakhir sampai usia 4 / 5 tahun.



### Lingkup Pengiriman

- Penahan kaki/Sepatu ALFA-Flex atau COMFOOT-Blue
- Allen-key 4 mm
- Kunci Torx TX20
- penahan abduksi kaki ALFA-Flex Brace

### Informasi penting:

Rel: Untuk digunakan selama durasi terapi maks. 5 tahun.  
Total Umur 8 tahun.

Sepatu: Umur 8 tahun

Tahun pembuatan dapat ditemukan di dua digit pertama nomor lot.

Penyimpanan: Bebas beku, terlindung dari cahaya, kelembaban udara sedang




### Penyesuaian panjang rel:

panjang bervariasi dari 180 sampai 300 mm.

Longgarkan 6 baut (dengan kunci torx).

Sesuaikan panjang rel minimal (!) selebar bahu anak.

Kencangkan 3 sekrup atau lebih, **amankan dengan "LOCTITE 222"!**

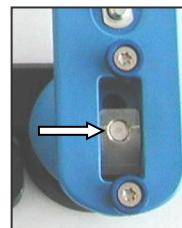

### Penyesuaian angular rel:

1. Longgarkan baut (Allen-key)
2. Sesuaikan ekstensi dorsal dengan rata-rata skala bola (jika tidak ditentukan oleh dokter: 5° sampai 10°)
3. Sesuaikan abduksi dengan bantuan dari jendela lihat pada rel (jika tidak ditentukan oleh dokter: 70° untuk kaki pengkor, 40° untuk kaki sehat).
4. Kencangkan baut dengan sangat cepat, **amankan dari terlepas tidak disengaja dengan "LOCTITE 222"!**  
**(Perhatian: Awas bahaya tertelan/tersedak)**

### Memasang sepatu dan rel:

1. Masukkan kaki ke sepatu sehingga tumit berada didalam belakang dan bawah - periksa jendela tumit.
2. Pertama tutup tali sepatu tengah dan ketatkan dengan cepat (pastikan tumit ada di posisi yang benar), ketatkan tali sepatu lainnya
3. Atur sepatu ke kunci klik dari atas lalu geser kembali rel ke tumit sampai sekrup terkunci pada tempatnya.  
Untuk melonggarkan rel, tarik sekrup; geser rel sampai ujung arah jari kaki lalu angkat.

**Sepatu tidak dibuat untuk berlari! Awas slip!**