

Шина для отведения стопы для последующего лечения идиопатической косолапости (варусной стопы) в рамках терапии по методу Понсетти.
Рекомендуемая продолжительность лечения: с момента последнего снятия гипса до 4./5. года жизни ребенка.



Объем поставки

- Сандалии ALFA-Flex или COMFOOT-Blue
- Шестигранный ключ Imbus 4 мм
- Ключ Torx TX20
- Шина ALFA-Flex Brace

Важная информация:

Обувь: срок службы 8 лет.

Шина: для применения при продолжительности лечения максимум 5 лет. Общий срок службы: 8 лет.

Год изготовления можно узнать по первым двум цифрам серийного номера.

Хранение: в обогреваемом, защищенном от света помещении, со средней влажностью воздуха.




Настройка шины по длине:

Длина шины регулируется в диапазоне 180 – 300 мм

Освободите 6 винтов (с помощью ключа Torx) Отрегулируйте шину на длину не менее (!) чем ширина плеч ребенка.

Крепко затяните винты 3-мя и более витками, зафиксируйте их с помощью „LOCTITE 222“!

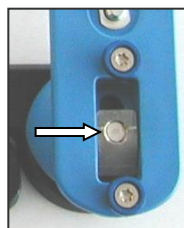

Настройка уголков шины:

1. Освободите винт (с помощью ключа Imbus)
2. Настройте величину тыльного вытяжения по шариковой шкале (5-10°, если врач не указал иного)
3. Настройте величину отведения стопы на смотровом окошечке шины (70° для косолапой стопы и 40° для здоровой стопы, если врач не указал иного)

4. Крепко затяните винт, и зафиксируйте его против непроизвольного отвинчивания с помощью „LOCTITE 222“! (Внимание: в противном случае существует опасность проглатывания/удушья)

Обувание сандалий и закрепление шины:

1. Поставьте стопу ребенка в обувь таким образом, чтобы пятка полностью находилась сзади и снизу – проверка положения - через смотровое окошечко
2. Затем закройте сначала средний ремешок и крепко его затяните (он задерживает стопу в правильном положении), остальные ремешки закройте без сильной затяжки
3. Поставьте ботинок сверху на замок с защелкой и протолкните шину назад по направлению к стопе, пока штифт на защелкнется. Для освобождения шины потяните штифт, протолкните шину до упора в направлении верхушки стопы и снимите ее.

Сандалии не предусмотрены для бега! Ребенок может подскользнуться!