

Aksesorë në ortozën e spostimit të këmbëve për trajtimin idiopatik sipas mënyrave konservatore terapeutike të Dr. Ponseti.

Për t'u përdorur në trajtimin e foshnjave shumë të vogla ose të parakohshme si një pjesë qendrore veçanërisht e shkurtër dhe e lehtë për disa splinta të lëvizjes së këmbëve.




Informacione të rëndësishme:

Volumi i dorëzimit:

1x Urë Sameda Mini, urë e shkurtër me shina

Aksesorë për:

Shina e lëvizjes së këmbës ALFA-Flex Light Brace
Shina e lëvizjes së këmbës BETA-Flex Brace

Data e prodhimit: Në produkt/ paketim sipas këtij simboli: 

Jetëgjatësia: 8 vjet

Mjet: Çelësi Allen/ Çelësi Torx
(bashkangjitur me shinën e lëvizjes së këmbëve)

Ruajtja: pa ngricë, mbrojtje nga drita, me lagështi mesatarisht të lartë

Pastrimi: Vetëm me një leckë të lagur, mos përdorni ndonjë agjent të ashpër pastrimi!

Përdorimi:

Aksesorë futet në shinën e lëvizjes së këmbëve si një pjesë e mesme. Splinti i lëvizjes së këmbëve përdoret si një sistem i ortozës së lëvizjes së këmbëve me mbajtës të përshtatshëm të këmbëve dhe, nëse është e nevojshme, pajisje të tjera.

Kur instaloni aksesorin në shinën e lëvizjes së këmbëve, të gjitha vidat duhet të sigurohen me mjete të mbylljes së vidave!

Ju lutem vini re:


Për urën shtesë Sameda Mini, vlen ura e shkurtër me shina Udhëzimet e Sameda-s për përdorim me numër identifikimi: **TL 30nn-002**

(nn =vendmbajtës për kodin e numrit gjuhët e ndryshme)

Futja në mbajtësen e lehtë ALFA-Flex Light Brace*:

1. Për momentin, vetëm lironi vidën e mbështetjes së poshtme në njërin anë të shinës së rrëmbimit të këmbëve ALFA-Flex Light Brace. Për ta bërë këtë, përdorni mjetin e dhënë me hekurudhë: Çelësi Allen (SW 4). Sigurohuni që asnjë nga artikujt të mos humbasë.
2. Kthejeni shinën butësisht. Hiqni mbështetjen e sipërme, hemisferën dhe pllakën e montimit të këpucëve. Kushtojini vëmendje të veçantë pjesës së shtytjes me fije të brendshme në pllakën e montimit të këpucëve.
3. Vendosni urën Sameda Mini me vrimën në fund të urës në vidën e mbështetjes së poshtme. Pjesa e sipërme e shinës është shënuar me një afishe të ndritshme të produktit, e cila duhet të tregojë lart. Vendosni mbështetësin e sipërm, hemisferën dhe pllakën e montimit të këpucëve në vidë njëra pas tjetrës. Krahasoni renditjen e pjesëve individuale me strukturën origjinale në anën tjetër të urës ALFA-Flex Light dhe foton 4. Sigurohuni që pjesa e shtytjes të futet në pozicionin e duhur.
4. Siguroni vidhat me përbërjen e bllokimit të vidhave. Shtrëngoni vidën në mbështetjen e poshtme. Përsëritni hapat 1-3 në anën tjetër.

*Ngjyrosje të ndryshme nga mostra e fotove në produktin origjinal

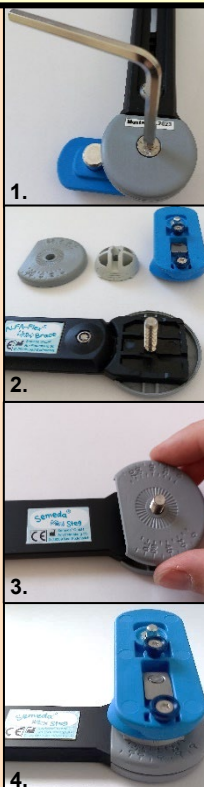

Futja në BETA-Flex Brace:

1. Lironi dy vidhat e strehës së rotorit të splintës së lëvizjes së këmbës BETA-Flex Brace me dy rrotullime të plota. Për ta bërë këtë, përdorni mjetin e dhënë me hekurudhë: Çelësi Torx T10.
2. Tërhiqeni kapakun e rotorit nga fundi, pak larg njëri-tjetrit. Tërhiqeni rrjetën e shinës nga kutia e rotorit. Përsëritni hapat 1 dhe 2 për të dytën. Strehimi i rotorit. Lëvizja e këmbës tani është e ndarë në 3 pjesë individuale.
3. Fusni urën Sameda Mini, urën e shkurtër me shina në kutinë e rotorit. Pjesa e sipërme e shinës është shënuar me një afishe të ndritshme të produktit. Rrjeta e shinës duhet të futet në strehimin e rotorit në mënyrë të tillë që pllakat e montimit të këpucëve dhe rrjeta e shinës të pozicionohen si në fig. 3. Shtypni kutinë përkatëse të rotorit përsëri në mënyrë që hendeku në rrjetën e shinës të mbyllet.
4. Kontrolloni nëse streha e rotorit përshtatet mirë rreth urës së futur Sameda Mini. Siguroni vidhat me përbërjen e bllokimit të vidhave. Shtrëngoni të dy vidhat në kutinë përkatëse të rotorit me dy rrotullime të plota me çelësin Torx T 10.

